

Advance IF CIC x17, Advance IF Canal x17

Gebruikershandleiding



advance

Inhoudsopgave

Welkom	4
Uw hoortoestellen	5
Type toestel	5
Vertrouwd raken met uw hoortoestellen	5
Componenten en benamingen	6
Bedieningsregelaars	8
Instellingen	9
Batterijen	10
Batterijformaat en hanteertips	10
Batterijen vervangen	11
Dagelijks gebruik	12
In- en uitschakelen	12
De hoortoestellen in- en uitdoen	14
Het volume aanpassen	17
Het kiezen van een luisterprogramma	17
Bijzondere luistersituaties	18
Aan de telefoon	18
Onderhoud en verzorging	19
Hoortoestellen	19
Oorstukjes	20
Professioneel onderhoud	22

Meer informatie	23
Veiligheidsinformatie	23
Draadloze functie	23
Accessoires	23
In dit document gebruikte symbolen	24
Problemen oplossen	24
Specifieke nationale informatie	26
Service en garantie	27

Welkom

Hartelijk dank dat u hebt gekozen voor onze hoortoestellen. Natuurlijk heeft u, net zoals met alle nieuwigheden, even tijd nodig om hiermee vertrouwd te raken.

Deze handleiding zal u samen met de ondersteuning van uw audicien helpen om meer te weten te komen over de voordelen en de betere levenskwaliteit die uw hoortoestellen u zullen bieden.

Om zoveel mogelijk uit uw hoortoestellen te halen, adviseren wij u om ze elke dag een hele dag lang te dragen. Hierdoor zult u er snel aan gewend raken.



VOORZICHTIG

Lees deze gebruiksaanwijzing en de veiligheidshandleiding grondig en volledig door. Volg de veiligheidsinformatie om schade of letsel te voorkomen.

Uw hoortoestellen



Deze gebruiksaanwijzing beschrijft optionele functies waarover uw hoortoestellen al dan niet kunnen beschikken.

Vraag uw audicien om aan te geven welke functies geldig zijn voor uw hoortoestellen.

Type toestel

Uw hoortoestellen worden direct in het oorkanaal gedragen. De toestellen zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar of personen met een verstandelijk niveau lager dan dat van een 3-jarige.

Vertrouwd raken met uw hoortoestellen

Het is aan te bevelen dat u zich vertrouwd maakt met uw nieuwe hoortoestellen. Terwijl u de hoortoestellen in uw hand houdt, probeert u de bedieningsregelaars te gebruiken en gaat u na waar ze zich op het toestel bevinden. Op die manier kunt u de bedieningsregelaars gemakkelijker terugvinden en bedienen wanneer u de hoortoestellen draagt.



Als u problemen hebt met de bedieningsregelaars van uw hoortoestellen terwijl u de toestellen draagt, kunt u bij uw audicien vragen of er een afstandsbediening of een smartphone app beschikbaar is om uw hoortoestellen te bedienen.

Componenten en benamingen


Deze gebruiksaanwijzing beschrijft meerdere types hoortoestellen. Gebruik de onderstaande afbeeldingen om het door u gebruikte type hoortoestel te identificeren.

IF Canal





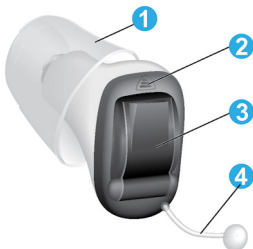

- 1 Oorstukje (Click Sleeve)
- 2 Batterijlade
(aan/uit-schakelaar)
- 3 Druktoets
- 4 Microfoon
- 5 Verwijderingskoord
(optioneel)

IF CIC



- 1 Oorstukje (Click Sleeve)
- 2 Microfoon
- 3 Batterijlade
(aan/uit-schakelaar)
- 4 Verwijderingskoord

U kunt de volgende standaard oorstukjes gebruiken:

Standaard oorstukjes	Formaat
<input type="checkbox"/> 	Click Sleeve (geventileerd of gesloten)
<input type="checkbox"/> 	Click Dome™ enkel (open of gesloten)
<input type="checkbox"/> 	Click Dome semi open
<input type="checkbox"/> 	Click Dome dubbel

De standaard oorstukjes kunnen gemakkelijk vervangen worden. Lees meer in hoofdstuk "Onderhoud en verzorging".

Bedieningsregelaars

Met de bedieningsregelaars kunt u bijvoorbeeld een ander luisterprogramma kiezen. Uw hoortoestellen hebben een druktoets of geen bedieningsregelaar.

Uw audicien heeft de door u gewenste functies geprogrammeerd in de druktoets.

Bedieningsregelaar	Links	Rechts
Druktoets	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Geen bedieningsregelaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Functie drukknop	L	R
Druk kort:		
Programmawisseling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Druk lang:		
Stand-by/inschakelen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

L = Links, R = Rechts

Instellingen

Luisterprogramma's

1

2

3

4

5

6

Lees meer in hoofdstuk
"Het kiezen van een luisterprogramma".

Functies



Dankzij de **inschakelvertraging** kunt u hoortoestellen zonder fluitgeluiden inbrengen.

Lees meer in hoofdstuk "In- en uitschakelen".



De **tinnitus-functie** genereert een geluid dat u afleidt van uw tinnitus.



Met de functie **wireless** kunt u beide hoortoestellen tegelijk bedienen.

Lees meer in hoofdstuk "Draadloze functie".

Batterijen

Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt het geluid zwakker en/of hoort u een waarschuwingssignaal. Het type batterij zal bepalen wanneer u de batterij dient te vervangen.

Batterijformaat en hanteertips

Vraag uw audicien naar de aanbevolen batterijen.

Batterijformaat: 312 10

- Gebruik steeds het juiste batterijformaat voor uw hoortoestellen.
- Verwijder de batterijen als u de hoortoestellen enkele dagen niet wilt gebruiken.
- Draag steeds reservebatterijen bij u.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk en volg uw plaatselijk regelgeving met betrekking tot het verwijderen van batterijen.

Batterijen vervangen


De batterij verwijderen:

- ▶ Open de batterijlade.
- ▶ Verwijder de batterij handmatig.



De batterij plaatsen:

- ▶ Als de batterij een beschermende folie heeft, dient u deze pas te verwijderen wanneer u klaar bent om ze te gebruiken.
- ▶ Plaats de batterij zo dat het "+"-symbool naar boven wijst.

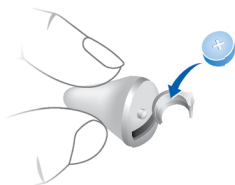

- ▶ Sluit de batterijlade voorzichtig. Als u een weerstand voelt, is de batterij niet goed geplaatst.

Gebruik niet veel kracht bij het sluiten van de batterijlade. De lade zou beschadigd kunnen raken.

Dagelijks gebruik

In- en uitschakelen

U heeft de volgende mogelijkheden om uw hoortoestellen in of uit te schakelen.

Via de batterijlade:

- ▶ Inschakelen: Sluit de batterijlade.

Het **standaard** volume en luisterprogramma zijn ingesteld.

- ▶ Uitschakelen: Open de batterijlade helemaal.

Via de drukknop:

- ▶ In- of uitschakelen: Druk op de drukknop en houd deze gedurende een aantal seconden ingedrukt. Raadpleeg het hoofdstuk "Bedieningsregelaars" om uw bedieningsregelaars in te stellen.

Na het inschakelen blijven het **laatst** gebruikte volume en luisterprogramma ingesteld.

Via de afstandsbediening:

- ▶ Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening op.

Na het inschakelen blijven het **laatst** gebruikte volume en luisterprogramma ingesteld.

Wanneer u de hoortoestellen draagt, kan een optionele signaaltoon aangeven wanneer een toestel in- of uitgeschakeld wordt.

Wanneer de **inschakelvertraging** geactiveerd is, schakelen de hoortoestellen met enkele seconden vertraging in. Gedurende die tijd kunt u de hoortoestellen indoen zonder een vervelend fluitgeluid te horen.

De "inschakelvertraging" kan door uw audicien worden geactiveerd.

De hoortoestellen in- en uitdoen




VOORZICHTIG

Risico op letsel!

- ▶ Draag het hoortoestel altijd met een oorstukje.
- ▶ Let erop dat het oorgedeelte volledig bevestigd is.


Een hoortoestel plaatsen:

- ▶ Identificeer het rechter en linker hoortoestel, zodat u het in het juiste oor plaatst. De tekst op de hoortoestellen geeft de kant aan:
"R" = rechteroor
"L" = linkeroor
- ▶ Zorg ervoor dat de klep van de Click Sleeve naar de gedrukte tekst op het hoortoestel is gericht.

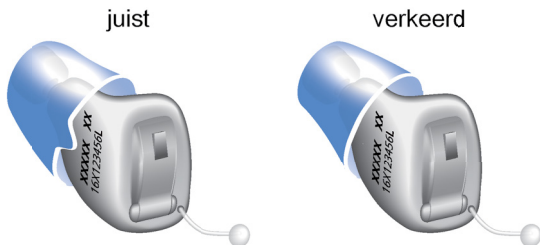


- ▶ Houd het hoortoestel correct vast voor het te plaatsen: let op het trekkoordje, dat de onderkant aangeeft. Als

op het hoortoestel een pijl is afgedrukt, dan moet deze naar boven zijn gericht.

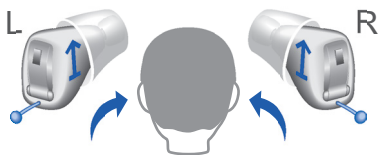

- ▶ Plaats het hoortoestel voorzichtig in de gehoorgang.
- ▶ Draai het lichtjes tot het goed zit.

Open en sluit uw mond om te voorkomen dat er zich lucht in de gehoorgang ophoopt.

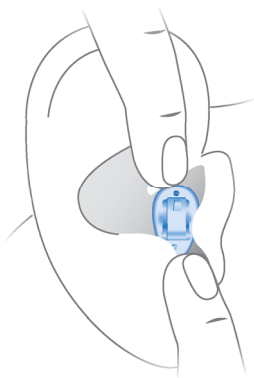

i

- Het kan handig zijn om het **rechter** hoortoestel met de **rechter** hand en het **linker** hoortoestel met de **linker** hand te plaatsen.
- Als u problemen heeft met het inbrengen van het oorstukje, gebruikt u de andere hand om uw oorlel voorzichtig omlaag te trekken. Hierdoor gaat de gehoorgang open en kan het oorstukje gemakkelijker worden ingebracht.

Een hoortoestel verwijderen:



AANWIJZING

Trek nooit aan de klep van de batterijlade om het hoortoestel te verwijderen. Dit zou uw hoortoestel kunnen beschadigen.

- ▶ Druk zacht tegen de achterkant van uw oor om het hoortoestel los te werken.
- ▶ Verwijder het hoortoestel door het verwijderingskoord naar de achterzijde van uw hoofd te trekken.



VOORZICHTIG

Risico op letsel!

- ▶ In zeer zelden voorkomende gevallen kan een oorstukje in uw oor achterblijven wanneer u het hoortoestel uitneemt. Als dit gebeurt, laat het oorstukje dan verwijderen door een medicus.

Reinig en droog uw hoortoestellen na gebruik. Lees meer in hoofdstuk "Onderhoud en behandeling".

Het volume aanpassen

Uw hoortoestellen passen automatisch het volume aan de luistersituatie aan.

- ▶ Wanneer u er de voorkeur aan geeft het volume handmatig te regelen, gebruikt u daarvoor een afstandsbediening. Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing van de afstandsbediening op.

Een optioneel signaal kan de volumewijziging aangeven.

Het kiezen van een luisterprogramma

Afhankelijk van de luistersituatie passen uw hoortoestellen het geluid automatisch aan.

Uw hoortoestellen hebben mogelijk ook een aantal luisterprogramma's waarmee u het geluid, indien nodig, kunt wijzigen. Een optionele signaaltoon kan de programmawijziging aangeven.


- ▶ Om het luisterprogramma te wijzigen, drukt u kort op de drukknop of gebruikt u een afstandsbediening.

Raadpleeg het hoofdstuk "Bedieningsregelaars" om uw bedieningsregelaars in te stellen. Raadpleeg de paragraaf "Instellingen" voor een lijst van uw hoorprogramma's.

Bijzondere luistersituaties

Aan de telefoon

Houd de telefoonluidspreker bij het telefoneren enigszins gedraaid, zodat hij het oor niet volledig bedekt.

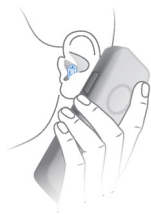

Telefoonprogramma

U prefereert een bepaald volume wanneer u de telefoon gebruikt. Vraag uw audicien om een telefoonprogramma te configureren.

- ▶ Schakel telkens over naar het telefoonprogramma, wanneer u aan de telefoon bent.

Of een telefoonprogramma geconfigureerd is voor uw hoortoestellen, is vermeld in het hoofdstuk "Instellingen".

Onderhoud en verzorging

Om schade te voorkomen is het belangrijk dat u zorg draagt voor uw hoortoestellen en dat u een aantal basisregels volgt. Deze zullen gauw deel gaan uitmaken van uw dagelijkse routine.

Hoortoestellen

Drogen en bewaren

- ▶ Droog uw hoortoestellen 's nachts.
- ▶ Informeer bij uw audicien naar aanbevolen droogproducten.
- ▶ Wanneer u uw hoortoestellen gedurende lange tijd niet gebruikt, bewaart u ze met open batterijlade en verwijderde batterijen in een droogstelsel, om de schadelijke gevolgen van vocht te voorkomen.

Reinigen

Reinig uw hoortoestellen dagelijks, doe dit om hygiënische redenen en om de functionaliteit in stand te houden.

- ▶ Reinig uw hoortoestellen dagelijks met een zachte, droge doek.
- ▶ Gebruik nooit stromend water en dompel de toestellen nooit onder in water.
- ▶ Oefen nooit druk uit tijdens het reinigen.
- ▶ Informeer bij uw audicien naar aanbevolen reinigingsprocedures, speciale verzorgingssets en verdere informatie over hoe u uw hoortoestellen in een optimale toestand kunt houden.




Oorstukjes

Reinigen

Cerumen (oorsmeer) kan zich opstapelen op de oorstukjes. Hierdoor kan de kwaliteit van het geluid beïnvloed raken. Reinig het oorstukje dagelijks.

- ▶ Reinig het oorstukje onmiddellijk na verwijdering met een zachte, droge doek.

Dit voorkomt dat oorsmeer droog en hard wordt.

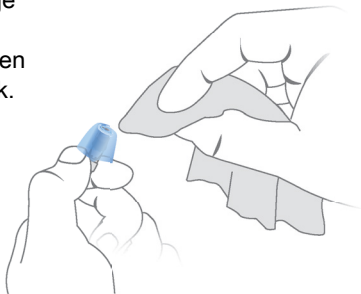

- ▶ Knijp op het topje van het oorstukje.




Vervangen

Vervang standaard oorstukjes ongeveer elke drie maanden. Vervang ze eerder als u scheurtjes of andere wijzigingen opmerkt. De procedure voor het vervangen van standaard oorstukjes is afhankelijk van het type oorstukje. In hoofdstuk "Componenten en benamingen", heeft uw audicien uw type oorstukje aangeduid.

Vervangen Click Sleeves

- ▶ Click Sleeve met uw vingers beetpakken en verwijderen.
- ▶ Bij het installeren van de nieuwe Click Sleeve, moet ervoor gezorgd worden dat de klep van de Click Sleeve naar de gedrukte tekst op het hoortoestel is gericht.

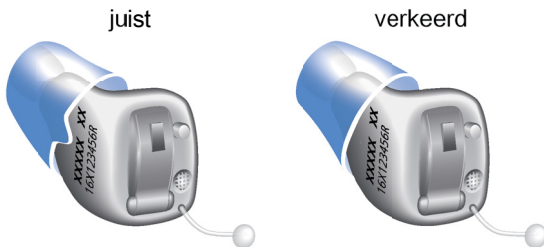


- ▶ Zorg er in het bijzonder voor dat de nieuwe Click Sleeve merkbaar op z'n plek wordt geklikt.



Vervangen Click Domes

Als u problemen ondervindt bij het verwijderen van de oude Click Dome, gebruikt u het verwijderhulpmiddel of volgt u de instructies op de verpakking van de Click Domes:

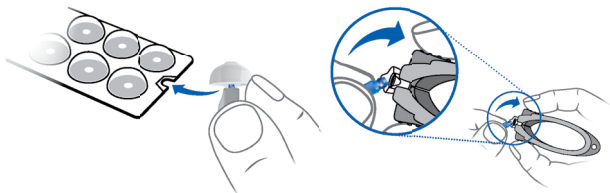

De Click Domes removal tool is als accessoire leverbaar.

- ▶ Zorg er in het bijzonder voor dat de nieuwe Click Dome duidelijk op zijn plaats klikt.



Professioneel onderhoud

Uw audicien kan uw hoortoestellen grondig reinigen en onderhouden.

Vraag uw audicien naar uw individuele onderhoudstermijnen en ondersteuning.

Meer informatie

Veiligheidsinformatie

Meer informatie over de veiligheid vindt u in de veiligheidshandleiding die met het toestel wordt geleverd.

Draadloze functie

Mogelijk beschikken uw hoortoestellen over een draadloze functie. Hierdoor wordt synchronisatie voorzien tussen uw twee hoortoestellen:

- Als u het programma of volume op één toestel wijzigt, wordt het andere automatisch ook gewijzigd.
- Beide hoortoestellen passen automatisch gelijktijdig aan de luistersituatie aan.

Door de draadloze functie kunt u een afstandsbediening gebruiken.

Raadpleeg het hoofdstuk "Instellingen" om te zien of uw hoortoestellen over een draadloze functie beschikken.

Accessoires

Het type beschikbare accessoires is afhankelijk van het type toestel. Voorbeelden hiervan zijn: een afstandsbediening, een toestel voor audiostreaming of een smartphone app voor afstandsbediening.

Raadpleeg uw audicien voor meer informatie.

In dit document gebruikte symbolen



Wijst op een situatie die tot ernstige, middelzware of lichte letsels kan leiden.



Maakt u attent op mogelijke materiële schade.



Advies en tips over hoe u beter kunt omgaan met uw toestel.

Problemen oplossen

Problemen en mogelijke oplossingen

Het geluid is zwak.

- Sluit de batterijlade voorzichtig helemaal.
 - Reinig het hoortoestel.
 - Vervang de lege batterij.
 - Reinig of verwissel het oorstukje.
-

Het hoortoestel maakt een fluitend geluid.

- Plaats het hoortoestel opnieuw tot het goed zit.
 - Reinig of verwissel het oorstukje.
-

Het geluid klinkt vervormd.

- Vervang de lege batterij.
 - Reinig of verwissel het oorstukje.
-

Het hoortoestel geeft signaaltönen af.

- Vervang de lege batterij.
-

Problemen en mogelijke oplossingen

Het hoortoestel werkt niet.

- Schakel het hoortoestel in.
- Sluit de batterijlade voorzichtig helemaal.
- Vervang de lege batterij.
- Controleer dat de batterij op de juiste manier is geplaatst.
- De inschakelvertraging is actief. Wacht enkele seconden en controleer opnieuw.

Neem contact op met uw audicien als u verdere problemen ondervindt.

Specifieke nationale informatie

Service en garantie

Serienummers

Links:

Rechts:

Servicedatums

1: 4:

2: 5:

3: 6:

Garantie

Datum aankoop:

Garantieperiode in maanden:

Uw audicien



Wettelijke fabrikant

Sivantos GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Duitsland
Telefoon: +49 9131 308 0

Sivantos GmbH is a trademark licensee of
Specsavers Hearcare Group Ltd.



Document No. 03104-99T02-5400 NL
Order/Item No. 109 444 65
Master Rev03, 12.2017
© 12.2017, Sivantos GmbH. All rights reserved

www.specsavers.com

